



CS 7600



Le premier système d'imagerie
à plaques réellement intelligent





Profitez d'un workflow véritablement automatisé et sécurisé.

Le système CS 7600 de Carestream Dental fixe une nouvelle norme en matière d'imagerie dentaire, en simplifiant de manière révolutionnaire vos procédures de travail tout en vous procurant toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour des images d'une qualité hors pair. Grâce à la technologie exclusive « Scan & Go », ce système véritablement intelligent permet d'automatiser les tâches et réconcilier rapidité, facilité d'utilisation et qualité dans une solution unique incroyablement polyvalente et compacte, idéale quelle que soit la configuration de votre cabinet.

Aussi simple d'utilisation qu'un film avec néanmoins tous les avantages du numérique, le système CS 7600 offre le

meilleur des deux mondes. Vous apprécierez la simplicité d'un workflow similaire à celui des films, tout en visualisant une image de haute qualité obtenue en seulement 5 secondes. Mais ce qui rend ce système véritablement unique est sa capacité à ajouter électroniquement des informations aux plaques avant l'examen, comme le nom du patient et le numéro de la dent, de telle sorte qu'une fois les plaques numérisées, les images sont automatiquement acheminées vers l'ordinateur et le fichier patient correspondants. Ceci prévient la confusion de plaques et réduit le temps d'opération, facilitant ainsi le processus et le rendant incroyablement efficace.

* Disponible en option



Nom du patient

Numéro de la dent

Nom du dentiste

Poste de travail

Date et Heure

**NOUVELLE
TECHNOLOGIE
« SCAN &
GO »**

Avantages principaux :

- Qualité d'image exceptionnelle, résultats extrêmement rapides
- Les plaques intelligentes « Smart Plates » et la technologie « Scan & Go » minimisent le risque de mélange de plaques, de confusion et d'erreurs
- Une procédure de travail véritablement automatisée et sécurisée permet d'augmenter la productivité du cabinet
- Un workflow familier, similaire à celui des films, réduit le temps d'apprentissage
- Les plaques fines, souples et sans fil sont faciles à positionner et sont disponibles dans les mêmes tailles que celles des films

Workflow intelligent et rapide

Le système CS 7600 offre un workflow familier qui s'intègre facilement dans n'importe quel cabinet — plus simple et plus efficace que jamais. Simple à utiliser, le système CS 7600 est conçu pour améliorer les conditions d'examen non seulement pour vous mais également pour le patient. Notre technologie exclusive fournit des résultats en quelques secondes, réduisant radicalement le temps

d'attente pour vous et pour vos patients. Les plaques intelligentes intègrent une puce spéciale qui joint électroniquement les informations du patient aux images, vous permettant ainsi de numériser des plaques à votre convenance, réduisant le risque d'erreur humaine et vous apportant la tranquillité d'esprit.



Identification, acquisition, numérisation

Offrant toujours des résultats rapides de haute qualité, la caméra CS 7600 vous apporte tout ce que vous attendez d'un système haute performance d'imagerie intra-orale à plaques et plus encore. En un geste, l'option «Scan & Go» vous permet d'identifier de façon unique chaque plaque avant l'examen. Ensuite, au cours de la numérisation, le système reconnaît automatiquement les images et les envoie vers l'ordinateur et le fichier patient

correspondants afin d'être visualisées. Les plaques peuvent être numérisées dans n'importe quel ordre avec une intervention minimale de l'utilisateur, puis elles sont automatiquement effacées pour être de nouveau prêtes à l'emploi. En les manipulant avec soin, ces plaques robustes et résistantes aux rayures peuvent être utilisées des centaines de fois.



Les images du patient sont capturées à partir de la plaque identifiée et numérisé grâce au dispositif «Scan & Go» du système CS 7600.

En quelques secondes, les images sont automatiquement acheminées vers l'ordinateur, le fichier patient et la position appropriés.




Plusieurs utilisateurs peuvent utiliser le système CS 7600 pour plusieurs patients en même temps !

Disponible pour tous, à tout moment

Le système CS 7600 a été conçu pour être pratique, sécurisé et productif. Tout d'abord, il n'est plus nécessaire de réserver l'appareil ou de bloquer son accès pendant la numérisation. Plusieurs utilisateurs peuvent utiliser le système pour différents patients en même temps et à tout moment. Grâce à la mémoire intégrée du système, vous pouvez continuer à numériser les plaques même si le fichier patient est refermé, si votre ordinateur est éteint ou pendant une panne de réseau.

Le système permet également la numérisation « à la chaîne » et simplifie le passage d'un patient à un autre. Grâce à la technologie « Scan & Go », les plaques peuvent être mélangées entre les patients et les utilisateurs – les images seront quand même envoyées vers la destination prévue. Cette technologie est particulièrement pratique lors de la numérisation de radiographies complètes de la bouche ou pour les cabinets comprenant plusieurs salles de soin. Non seulement vous éliminez le risque de confusion et évitez d'avoir à numériser les plaques dans un ordre précis, vous n'avez également plus besoin de déplacer les images manuellement par un glisser-déposer vers l'emplacement approprié de votre ordinateur. Le système le fait pour vous.

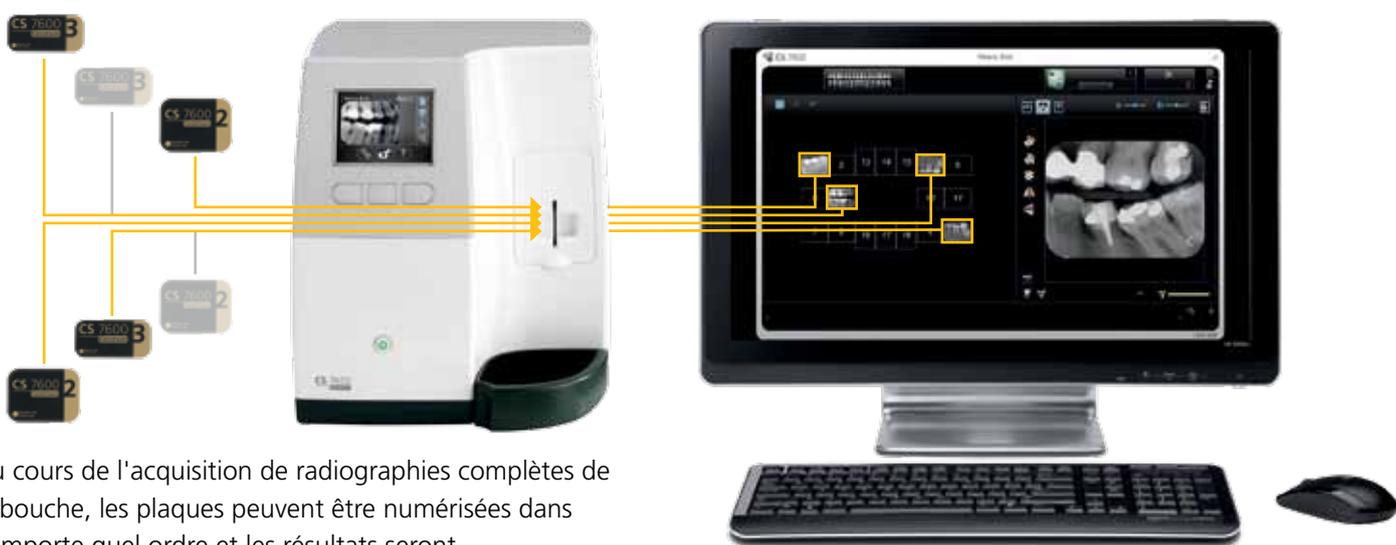

Au cours de l'acquisition de radiographies complètes de la bouche, les plaques peuvent être numérisées dans n'importe quel ordre et les résultats seront automatiquement dirigés vers leur emplacement respectif.



Qualité d'image exceptionnelle en quelques secondes

Grâce à une résolution réelle pouvant aller jusqu'à 17 pl/mm, le système CS 7600 fournit la haute qualité d'image nécessaire pour établir un diagnostic sûr. La plage d'exposition plus large des plaques élimine le risque de sur- ou sous- exposition et trois modes de numérisation (très haute résolution, haute résolution ou vitesse élevée) garantissent l'obtention de l'image souhaitée à chaque prise. En un seul clic, vous pouvez aussi améliorer les images à l'aide de filtres anatomiques.

En outre, le système CS 7600 figure parmi les systèmes actuels d'imagerie à plaques les plus rapides. Les premières images peuvent être visualisées en cinq secondes seulement et des radiographies complètes de la bouche sont numérisées et affichées en quelques minutes.



Les plaques « Smart Plates » produisent des images de haute qualité avec pratiquement aucun risque de sur- ou sous-exposition.

Une utilisation simple et conviviale



L'insertion incorrecte d'une plaque est automatiquement détectée. Des enveloppes hygiéniques protègent les plaques pendant le fonctionnement.



Les plaques fines, flexibles et confortables sont aussi simples à utiliser qu'un film.



L'écran couleur intégré vous guide à chaque étape et affiche toutes les listes d'utilisateurs et de patients actifs.

Ne nécessitant qu'un apprentissage minimal, le système CS 7600 met les fonctions de la technologie numérique avancée à la portée de tous, vous permettant d'obtenir des résultats plus rapides et plus réguliers. Le système détecte automatiquement l'insertion incorrecte d'une plaque et un écran couleur intégré fournit des instructions claires et

faciles à suivre ainsi que des messages d'erreur. En même temps, la fonction de prévisualisation des images permet de vérifier immédiatement la progression et la qualité des examens pour que vous n'ayez pas à effectuer des allers-retours entre l'appareil et votre ordinateur.




Les plaques « Smart Plates » sont disponibles en plusieurs tailles allant de 0 à 4 afin de pouvoir s'adapter à chaque patient et elles peuvent être réutilisées des centaines de fois.

S'adapte à n'importe quel cabinet

Le système CS 7600 peut être utilisé de façon individuelle ou partagé entre plusieurs postes de travail dans une pièce centrale ; il devient une solution polyvalente et économique pour les grands cabinets comme pour les petits. La taille compacte de l'appareil vous permet de l'installer à l'endroit qui convient le mieux à votre cabinet, que ce soit posé sur un bureau ou fixé sur un mur. Et grâce aux enveloppes hygiéniques des plaques « Smart Plate », l'acquisition et la numérisation des images peuvent s'effectuer dans n'importe quel environnement d'éclairage normal.

Le système est directement connecté au réseau ; son installation est donc simple et plusieurs salles d'examen peuvent se partager un ou plusieurs appareils, sans avoir à dédier un système informatique pour son fonctionnement. La connectivité Ethernet permet un accès immédiat aux images à partir de n'importe quel ordinateur au sein du cabinet.

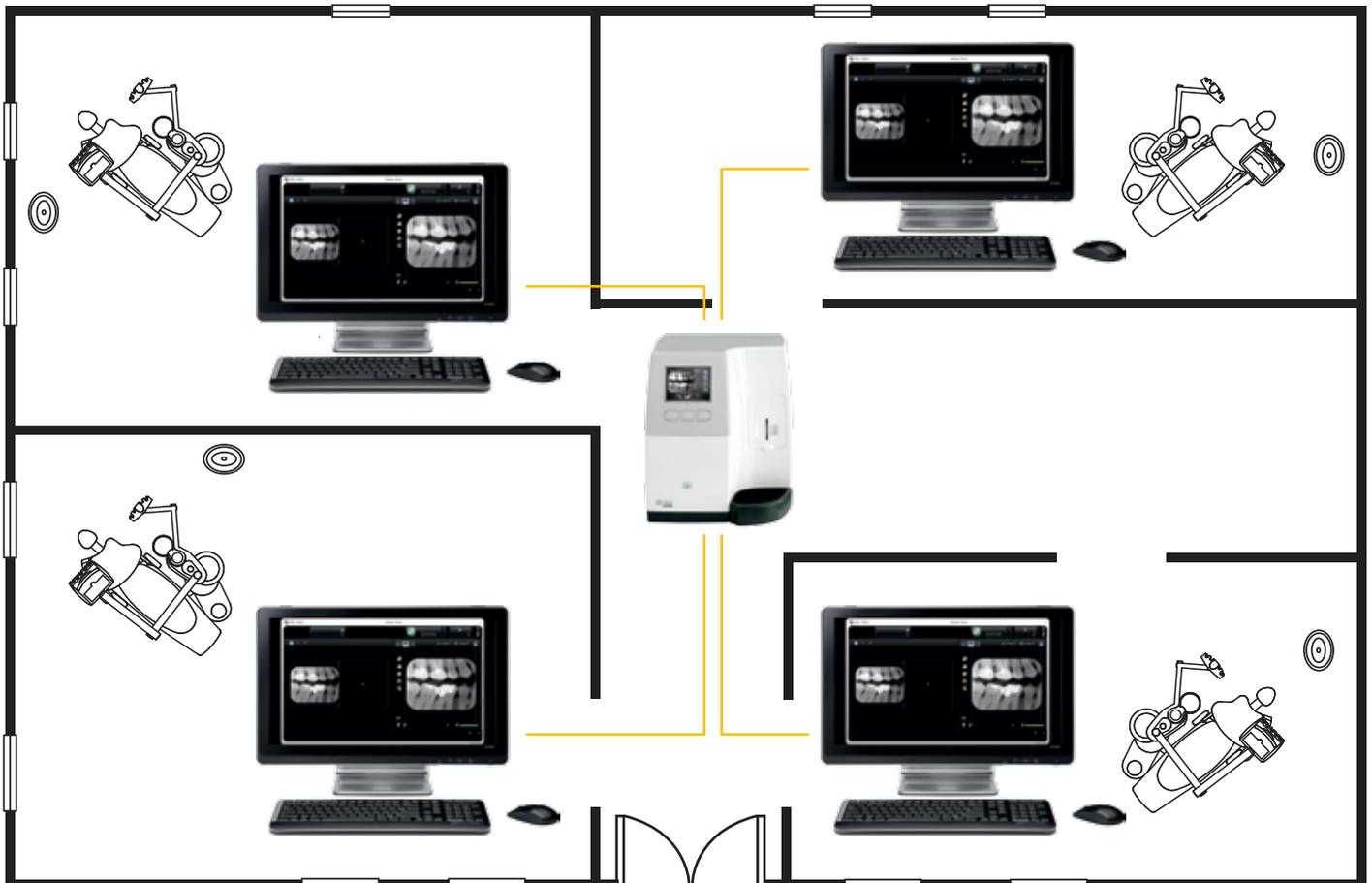



Logiciel intuitif et partage facile des images

Qu'il soit utilisé comme un programme indépendant ou intégré à votre solution de gestion de cabinet, le logiciel d'imagerie dentaire Kodak sert de panneau de contrôle pour tous nos systèmes d'imagerie numérique. Il peut être facilement intégré et est simple à utiliser, ce qui rend l'analyse des images facile et rapide.

Grâce à des outils puissants de traitement d'image et une interface conviviale, le logiciel rend le paramétrage et la visualisation des images intuitifs. Il facilite également le partage des images avec les correspondants. En outre, les radiographies convaincantes améliorent la communication avec les patients et l'acceptation des traitements recommandés.



Des outils puissants de traitement d'image améliorent le contraste de l'image en un seul clic.



Il est simple de prendre des mesures précises et d'annoter ou de mettre en surbrillance les régions d'intérêt.



Toutes les images de vos patients peuvent être directement accédées à partir du logiciel d'imagerie Kodak.

Caractéristiques techniques

Résolution de numérisation des plaques d'imagerie*

- Super haute résolution 17 pl/mm
- Haute résolution 14 pl/mm
- Vitesse élevée 8 pl/mm

Formats des plaques d'imagerie Hauteur x largeur (mm)	Taille 0 – 22 mm x 35 mm
	Taille 1 – 24 mm x 40 mm
	Taille 2 – 31 mm x 41 mm
	Taille 3 – 27 mm x 54 mm
	Taille 4 – 57 mm x 76 mm

Alimentation électrique 100–240 V (secteur), 50/60 Hz, 1,5 A

Dimensions du système 266,5 mm (H), 236,6 mm (L), 259,4 mm (P)

Poids Environ 6 kg

*pl/mm : nombre de paires de lignes par mm
(mesuré sur le quadrillage de résolution cible, dans le sens de la numérisation)



Accessoires


Des accessoires peuvent être commandés avec le système CS 7600, notamment le dispositif « Scan & Go », un coffret pour faciliter le rangement des plaques et des plaques « Smart Plates » supplémentaires disponibles en cinq tailles différentes.

Enveloppes hygiéniques

L'objectif des enveloppes pour plaque est double : protéger vos patients de toute contamination croisée et protéger les plaques de la lumière et des rayures.

Un support sur lequel vous pouvez compter

Comme pour tous nos produits, le système CS 7600 bénéficie d'une maintenance et assistance technique assurées par des spécialistes de Carestream Dental. Disponible avec divers services de téléassistance, le système permet à nos équipes de maintenance d'effectuer à distance des tâches de configuration, diagnostic, dépannage, étalonnage et mise à jour logicielle – garantissant une disponibilité maximale du système et réduisant les coûts de maintenance. En tête du marché de l'imagerie dentaire depuis plus d'un siècle, Carestream Dental offre des systèmes d'imagerie dentaire et de gestion de cabinet permettant de simplifier votre workflow, de capturer et de partager des images facilement et d'améliorer les soins au patient.

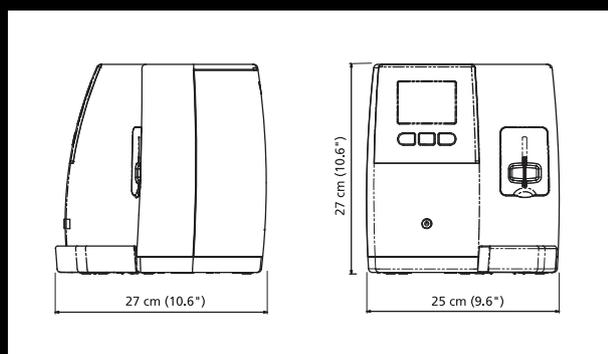

Vous souhaitez en savoir plus ?

Consultez le site www.carestream.com/7600 ou contactez votre revendeur local agréé.
Inscrivez-vous pour recevoir notre newsletter ! Envoyez un e-mail à dentalnews@carestream.com.