



#ENSEMBLE

VOUS PROTEGER DANS LA REPRISE DE VOTRE ACTIVITE

dentallproject.

LA PROMESSE DE LA SÉRÉNITÉ

Chers praticiens, Chères praticiennes,

La crise sanitaire que nous traversons actuellement a contraint la plupart d'entre vous à fermer vos cabinets.

Nous mesurons la gravité et la dangerosité de ce virus.

Nous voulons vous accompagner en toute sérénité vers la reprise et la réouverture de vos cabinets.

Vous trouverez à travers cet ouvrage des appareils et leurs démonstrations vidéos, des conseils et astuces qui vous permettront d'anticiper l'asepsie et la protection de vos équipes.

Toute l'équipe DentallProject et moi-même connaissons le caractère indispensable, vital de votre activité auprès de tous.

Nous saurons nous montrer prêts et disponibles pour vous soutenir dans la reprise.

#Ensemble



Cyril ARGAUD

SOMMAIRE :

Accueil du patient	p3
Protection du patient	p4
Stériliser l'air	p6
Diminuer le risque en soins	p7
Assainir l'eau du fauteuil	p8
Aspirer les aérosols	p9
Numériser les empreintes	p10
Pré-désinfecter en salle de soins	p11
Désinfecter les rotatifs	p12
Les atouts de la chaîne de stérilisation	p13
Stériliser les matériels et textiles	p14
Faites qualifier votre appareil de stérilisation	p15


Accueil du patient

Protéger la zone d'accueil et favoriser la distanciation sociale
Voici deux dispositifs permettant de protéger votre personnel

HYGIAPHONE EN PLEXIGLASS




- Polycarbonate épaisseur 5mm
- Passe document
- 92% de transmission de lumière
- Rigidité et dureté élevées
- Désinfection facile

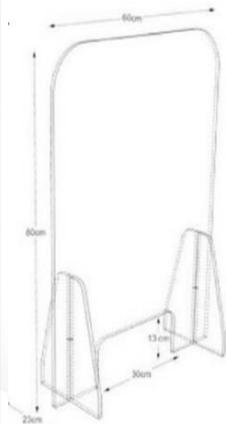

Dès 138 € TTC

STORE PARAVIRUS

- Fixation au plafond
- PVC souple & Aluminium
- Discret et esthétique
- N'altère pas le son
- Commande chaînette
- Réglable en hauteur
- Echange de documents et colis

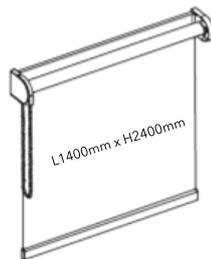

Dès 240 € TTC

ASTUCE

Réduisez le nombre de sièges dans votre salle d'attente et espacez-les.

Protection du patient

Réalisez au sein de votre cabinet un parcours de protection :
Lavage de mains, surchaussures, masques



HM 100

DISTRIBUTEUR SURCHAUSSURES

- Sans électricité
- Simple d'utilisation
- Poignée inox pour faciliter maintien des PMR

Livré avec 2000 Surchaussures

Dim. (mm) : L. 640 X L.220,5 H. 740

Poids : 5 kg.

690 € TTC

ILONA

DISTRIBUTEUR GEL HYDROALCOOLIQUE

- Sans contact manuel
- Adapté à toutes les bouteilles
- Durable et robuste
- Corps en inox brossé
- Commande au pied
- Convient pour toutes les
Dim. (mm) : D. 114 X H. 1000
(platine D. 330).
- Poids : 10,5 kg.

311 € TTC



Voir la démo



ASTUCE

Faites installer un écran qui vous permettra de diffuser le protocole d'hygiène

Protection du patient

Minimisez les contacts

Équipez vos patients pour vous protéger

DISTRIBUTEURS LUNA & ALTRO

Design, discret et élégants ces distributeurs permettent de s'équiper rapidement.

Vous aurez à portée de main :

Pour le distributeur
LUNA

- Masques
- Gants
- Gobelets
- Serviettes

Pour le distributeur
ALTRO

- Savon (distribution automatique)
- Diam : 28cm Prof : 12cm

Diam : 70cm Prof : 14cm

Disponibles en 7 coloris : 

Vendus ensemble ou séparément




Luna

Altro

525 € TTC l'un

990 € TTC les deux

Voir la démo

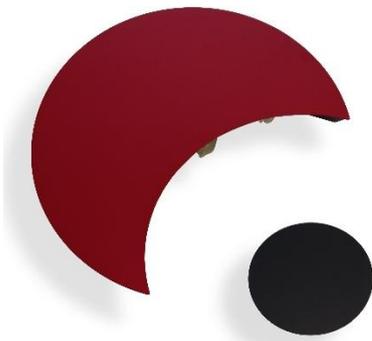

dentalart

DISTRIBUTEUR GEL HYDROALCOOLIQUE MURAL OSLO

V-korr blanc thermoformé et personnalisable
texte ou logo

Finition mélaminé ton chêne clair Porte battante
latérale avec serrure.

Distribution automatique de la solution hydro
alcoolique sur batterie ou secteur, avec bidon 1
litre

Dim : H776 x L350 x P220 mm



Dès 719 € TTC

ASTUCE

Débarassez le cabinet de tous magazines,
fascicules et éventuels jouets

Stériliser l'air

Réduisez le risque biologique dans l'air ambiant
Une solution pour lutter contre la volatilité des virus

STERILAIR PRO

Système irradiant par filtres préliminaires et lampes UVC à haute fréquence,

L'air est traité biologiquement et sans produits chimiques, réduisant ainsi la charge bactériologique de l'air (virucide, fongicide, bactéricide) assurant l'élimination de tous les microorganismes y compris les spores.

Silencieux – Ergonomique – Compact –Maintenance faible

Installable en salle de soins comme en salle d'attente

Installation fixe murale ou mobile sur un socle spécifique

Fonctionnement possible en continu ou programmable (jours & heures)

Rendement Jusqu'à 120m³ /heure

Structure en Aluminium

Consommables : Filtres et tubes UVC (9000 heures soit 4,5 ans à 8h/jour)

Dim. (mm) : H.820 x L.270 x P.110

Volume sonore : 32Db

Poids : 15 kg.



Dès 1 790 € TTC

Voir la démo



Diminuer le risque en soins

Les modes de contamination sont multiples

Voici une sélection d'articles pour simplifier votre protocole d'hygiène



MITIGEUR INTELLIGENT MISCEA

Robinet électronique avec capteurs.
Distributeur de savon et de désinfectant
intégrés

Réglage température de l'eau sans contact
Ecran d'affichage pour la sélection des
différentes fonctions.



1 680 € TTC

Voir la démo



WISH

DISTRIBUTEUR DE CONSOMMABLES

Personnalisez la distribution de vos consommables
Créez votre organisation selon vos protocoles

- Masques
- Gobelets
- Gants
- Savon
- Canules
- Désinfectant
- Serviettes
- Champs

dentalart

Dès **650 € TTC**

DES CLAVIERS PLUS HYGIENIQUES :

Outils du quotidien nos claviers peuvent-être
des surfaces de contamination indirecte

CLEANKEYS



Clavier sans fil dalle de verre – très silencieux
Lisse – Robuste aux chocs & rayures
Nettoyable aux lingettes désinfectantes

450 € TTC

LOWKEY



Clavier silicone sans fil et sans interstices
Très silencieux
Doux au toucher – effet tactile
Norme IP65 – (Protection poussière et jet)
Nettoyable au détergent

120 € TTC

Assainir l'eau du fauteuil

L'eau est une source de risques ; biofilm légionelles et autres germes
Traitez-la en amont ou au cœur de votre fauteuil

DENTAPURE

Une cartouche – 365 jours de traitement



Développée par la NASA pour offrir une qualité d'eau exceptionnelle et exempte de germe dans l'espace.
Branchement à la bouteille de votre unit ou au circuit général pour permettre un traitement de l'eau et l'élimination de toutes bactéries, virus et autres organismes nuisibles potentiellement présents dans l'eau.

Voir la démo



- Sans traitement choc
- Pas de pastille à mettre
- Aucune manipulation une fois installée

Dès 300 € TTC

HYGOWATER

Jusqu'à six fauteuils – combinaison filtre & électrolyse



Éliminez les micro-organismes en amont de l'arrivée de l'eau dans votre unit.

Technologie unique : filtration et électrolyse
Traitement de l'eau en 6 étapes :

- Préfiltres
- Filtres à charbon actif
- Échangeur d'ions
- Filtre fin
- Electrolyse
- Ultrafiltre



Suivant option et installation peut assainir l'eau de six fauteuils

Voir la démo



Qualité similaire à l'eau hygiénisée
DIN EN 1717
DIN EN 1988-100

Dès 3 990 €

ASTUCE

Changez vos filtres bactériologiques

Aspirer les aérosols

Limitez votre exposition et leur suspension dans l'air

EXSS

Détarteurs, turbines, piezos, ultra-sons, aéropolisseurs créent des aérosolisations et gouttelettes.

Celles-ci sont en suspension dans l'air puis retombent.

Évitez la contamination directe et indirecte liée aux aérosols lors de vos actes.

Sécurisez votre pratique en aspirant les aérosols en soins.

Les micro-organismes sont aspirés et traités par un triple filtre HEPA.

Filtration à 99,995% des germes et virus de diamètre supérieur ou égal à $0,3\mu\text{m}$

Les lampes UV détruisent les micro-organismes aspirés et assainissent l'air expiré.

Suivant vos soins, 10 puissances d'aspiration réglables par écran numérique




VOLTAGE	AC220 / 50 HZ
PUISSANCE	1200 W
ASPIRATION MAX	10 Kpa
FILTRE	3 épaisseurs HEPA
BRUIT	58 Db
POIDS	28 Kg
DIMENSIONS	275x275x 980 mm

Voir la démo



2 780 € TTC

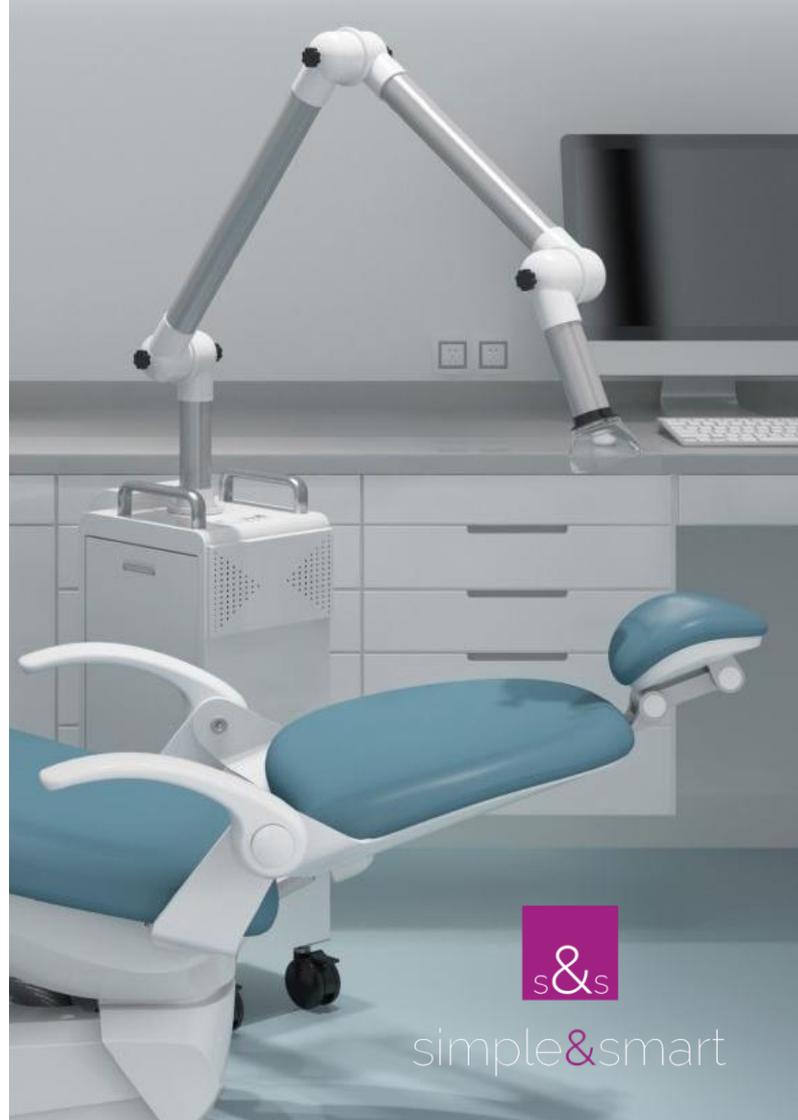

simple&smart

Numériser les empreintes

Les moulages nécessitent un long laps de temps en bouche
Minimisez les manipulations avec le laboratoire, numérisez !

CS 3600

CAMERA D'EMPREINTE OPTIQUE

Gagnez du temps et protégez-vous des germes en faisant vos empreintes numériquement.

- Acquisition rapide
- Embouts autoclavables
- Sans poudre
- Système ouvert
- Rendus en couleurs



Carestream
DENTAL



Réalisez vos empreintes en deux minutes



Trois modes d'acquisition :

Orthodontie
Restauration de prothèse
Prothèse sur implant

Voir la démo



Tarif sur devis

Pré-désinfecter en salle de soins

Evitez toute manipulation supplémentaire des outils réutilisables

Immergez-les directement dans le chariot dans du détergent

Les déplacements des matériels souillés vers la stérilisation seront sereins

CHARIOT DR BAILLY DESSERTTE TRI SELECTIF



Imaginé par un dentiste pour faciliter le tri et l'asepsie post-soins ce chariot permet :

- Le tri des instruments
- La gestion des DASRI
- La gestion des OPTC

Le plan en corian dispose aussi d'un emplacement pour le spray et les lingettes de décontamination.

Ce chariot vous est proposé tout équipé avec :

- l Bac de trempage Dürr Dental™
- l Becher en verre Gamasonic™
- l Becher grillagé Gamasonic™
- l Cupule germinicide Nicromonox™
- l Poubelle à fil
- l Bac 3litre OPTC

Nettoyages & Désinfection faciles du chariot

Dim : H820 x L533 x P500 mm

1 450 € TTC

FRIDAY CHARIOT DE STERILISATION



Ramassage en toute sécurité de tout type de matériels contaminés. Composé de :

- Bac de désinfection à froid
- Conteneur pour déchets spéciaux affûtés
- Tiroir pour tri sélectif

Dim : H855 x L500 x P500 mm

920 € TTC

Désinfecter les rotatifs

Beaucoup d'appareils sur le marché lubrifient et graissent vos instruments rotatifs
Un seul automate est capable de : Nettoyer + Désinfecter + Lubrifier

ICARE+

Un nettoyage automatique et approfondi évitera toute contamination croisée.
Vos rotatifs nécessitent un entretien particulier, pratiqué à la main il est efficace mais parfois incomplet ou trop superficiel

Icare+ nettoie, désinfecte et lubrifie l'intérieur de votre instrument en actionnant ses sprays internes et l'extérieur.

Avantages :

- Compatible avec toutes les marques de rotatifs
- Elimination de 99,995% des bactéries
- Traçabilité intégrée, extractible via USB
- EN ISO 15883-5

15 minutes = 4 instruments
Nettoyés-Désinfectés-Lubrifiés



★ ★ ★
DISPONIBLE EN PACK
AVEC INSTRUMENTATION

Voir la démo



6 490 € TTC



Les atouts de chaîne de stérilisation

Véritables alliés du quotidien dans la chaîne de stérilisation
Voici notre sélection susceptible de vous faciliter la vie et l'asepsie

SONODYN

LAVEUR-DESINFECTEUR PAR ULTRASON



SONIC

Préparation à la stérilisation des DMR et P.I.D

Deux cycles possibles :

- Asepsie intégrale des DMR / 45 minutes
- Asepsie intégrale de 6 P.I.D / 35 minutes

Tarif sur devis

B22

AUTOCLAVE STERILISATEUR



Futura ne nécessite pas de raccordement hydrique externe pour le traitement de l'eau de réseau. Un filtre de déminéralisation dans le réservoir principal permet le remplissage à l'eau du robinet.

- Norme EN13060
- Chambre en acier inoxydable électropoli
- Mémoire interne avec registre d'identification opérateur.
- 8 Programmes présélectionnés et 1 programme personnalisable
- Fermeture de sécurité automatisé

Tarif sur devis

Stérilisez vos matériels & textiles

Saviez-vous que vous pouvez dans le même appareil,
Stériliser vos instruments et textiles ?

CLINICLAVE C45

Autoclave de grosse capacité pour cabinet de groupe et clinique.

Une grande capacité, un rail intégré à la chambre permet un chargement facile

Programmable avec une variété de programmes pour s'adapter à votre activité :

- Programme universel
- Programme rapide B
- Programme rapide S
- Programme fragile
- Programme prions

Le géant de la stérilisation :

Dimension : L 65 x H 160 x P 91 cm

Taille de la chambre : Ø 44 x P 72 cm

MELAG
Expert en Hygiène

Voir la démo



Tarif sur devis

30 kg d'instruments + 7 kg de textile

Stérilisés en 45 minutes



Faites qualifier votre appareil de stérilisation

Votre appareil est-il toujours aussi performant ?

Nous proposons ce nouveau service de test

DETECTEZ LES ANOMALIES DE STERILISATION

Lors d'une intervention technique nous testons votre autoclave/ stérilisateur

Après une série de tests successifs : **HELIJ+BOWE+DICK**

- ✓ Test de pénétration de vapeur
- ✓ Test d'étanchéité
- ✓ Test qualité par sonde
- ✓ Contrôle de la stérilisation durant cycle
- ✓ Validation informatique du process
- ✓ Rapport complet de qualification

Remise d'un certificat

Assurez-vous de la qualité de votre chaîne de stérilisation

590 € TTC
HORS DÉPLACEMENT



dentallproject.

LA PROMESSE DE LA SÉRÉNITÉ

04 78 97 00 05 - www.dentallproject.com

150 Rue des Terres Bourdin – 69140 Rillieux la Pape
155 Cours Berriat – 38000 Grenoble
497 Avenue Victor Hugo – 26000 Valence