




Programme de maintenance

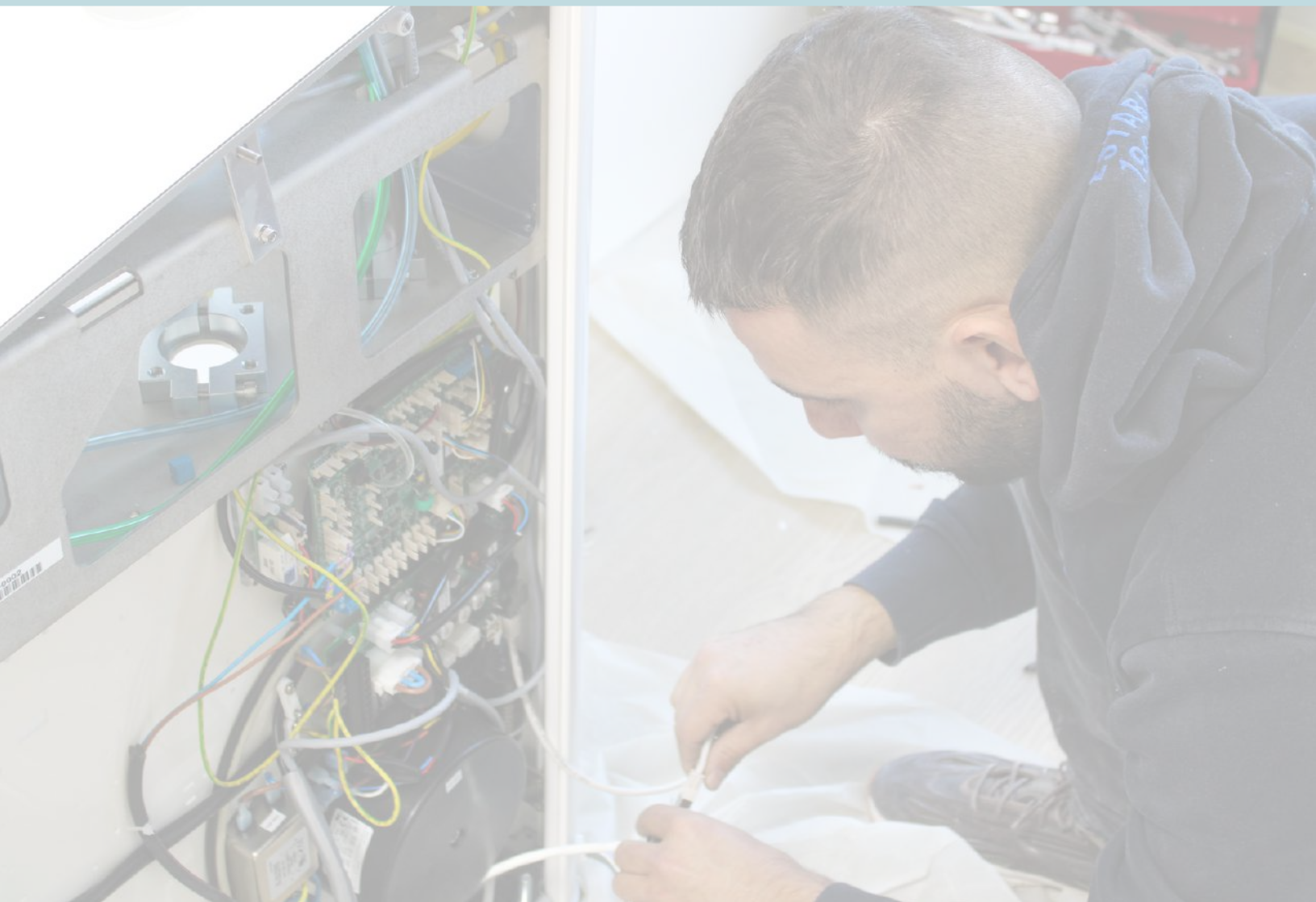


Cyril Argaud
Dirigeant

Dentall Project est une entreprise familiale fondée en 1990. Depuis plus de 35 ans, nous accompagnons les chirurgiens-dentistes avec une même exigence de qualité, de proximité et de service.

Cette expérience nous permet aujourd'hui de vous offrir une expertise reconnue et une parfaite compréhension de vos besoins.

Nous bénéficions d'un taux élevé de résolution dès la première intervention.

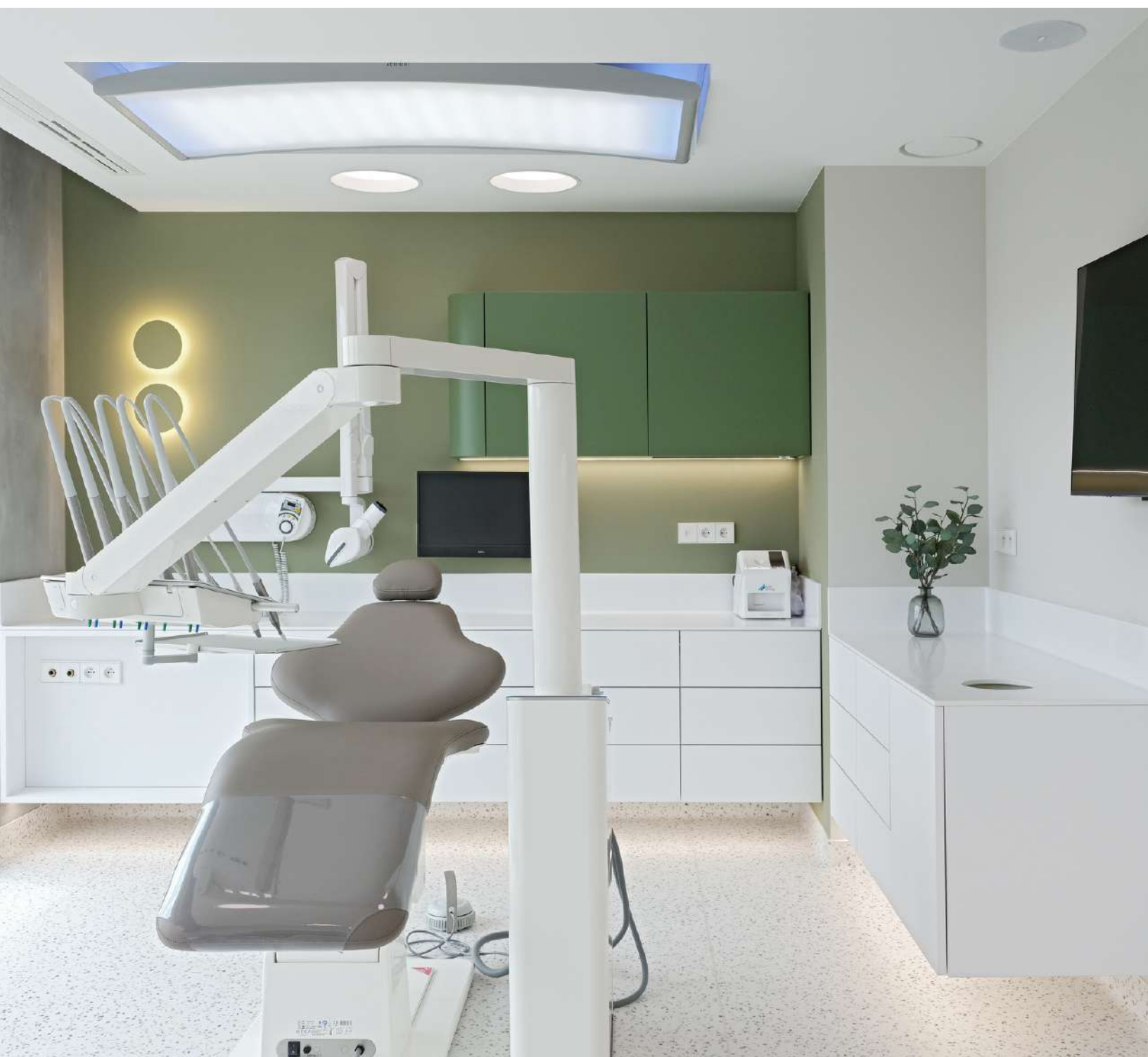


"Notre service technique est la véritable vitrine de l'entreprise."

Cyril Argaud

Chaque cabinet mérite une solution de maintenance adaptée

Notre équipe d'experts techniques :

Nos **techniciens sont polyvalents**, ce qui leur permet d'entretenir et de réparer une large gamme d'équipements dentaires de toutes marques

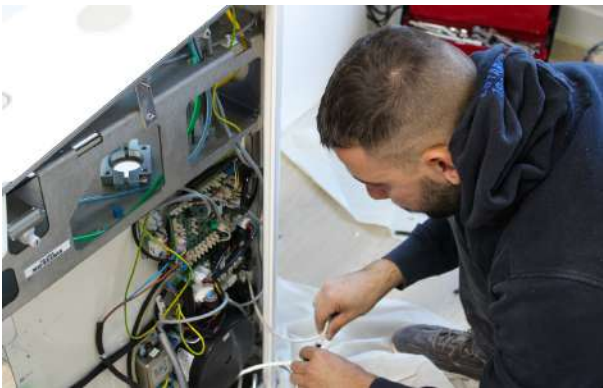

Fauteuils dentaires, tables, units, carts, scialytiques, radios intra-orales, cones beams, scanners intra-oraux, capteurs, compresseurs, aspirations, autoclaves, thermodésinfecteurs, soudeuses, ultrasons, séparateurs d'amalgame, nos techniciens sont des experts de l'équipement dentaire.

Nous assurons le suivi de vos équipements pour préserver leurs performances, leur fiabilité et votre sérénité au quotidien.



Mathieu Laurent Quentin Thibaud David Florent Russel Anthony



Olivier Rémy Benjamin Frederic Arthur Donovan Nolan



Personnalisez votre maintenance !
Choisissez le niveau de couverture que vous souhaitez et ses avantages.



Nous avons conçu trois niveaux de service
pour répondre à toutes vos attentes

Nos Services

De Maintenance à la carte

Essentiel : Intervention à la demande


Idéal pour ceux qui privilégient une approche ponctuelle, ce service convient parfaitement aux besoins occasionnels ou imprévus.

Confort : Suivi régulier

Optez pour ce service et ne laissez plus la révision de vos équipements au hasard. Assurez leur longévité grâce à un entretien programmé.

Prime : L'excellence au service de votre pratique

Devenez membre Prime et bénéficiez d'un entretien annuel inclus, d'interventions de dépannage, ainsi que de la livraison gratuite de vos consommables.

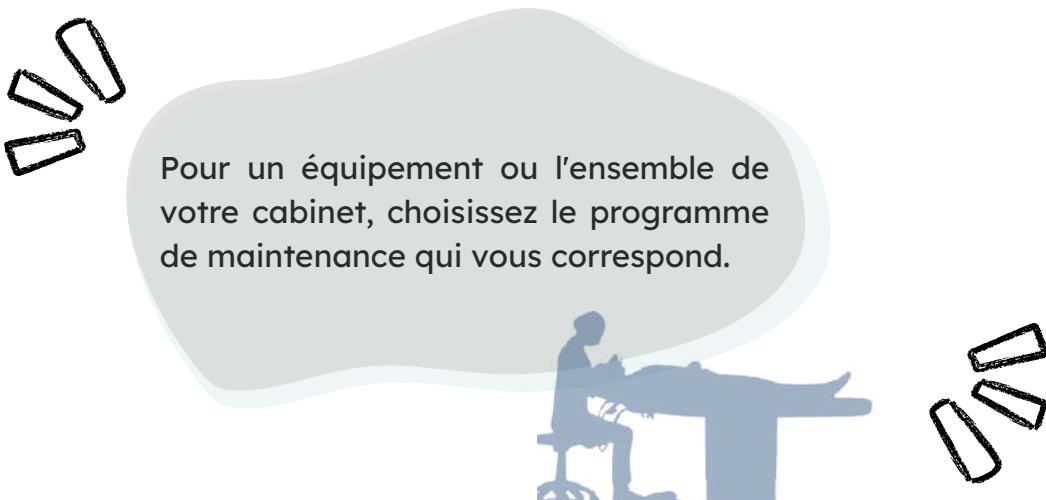

Pour un équipement ou l'ensemble de votre cabinet, choisissez le programme de maintenance qui vous correspond.





Comparatif des offres de maintenance

PRIME

CONFORT

ESSENTIEL

Préservez la performance de vos équipements et maîtrisez votre budget.

Grâce à nos programmes de maintenance adaptés à votre activité, vous bénéficiez d'un **suivi préventif régulier** et selon la formule choisie, d'**une prise en charge des pannes**.

	PRIME	CONFORT	ESSENTIEL
Maintenances Préventives Main d'œuvre et déplacement inclus	Oui	Oui	Non
Interventions Curatives Main d'œuvre et déplacement inclus	Oui	Oui	Non
Pièces détachées maintenance curative	Oui	Non	Non
Prêt de matériel	Oui	Oui	Non
Formation des équipes à la maintenance	Oui	Oui	Non
Frais de Livraison	Offerts	Offerts dès 150 € TTC	24 € TTC par commande

Sélectionnez les équipements et le programme de maintenance souhaité et nous établirons une offre parfaitement adaptée aux besoins de votre cabinet.





Maintenances Prime & Confort **Quels matériels inclure?**



COMPRESSEUR

Remplacement des filtres d'admission

Nettoyage externe général

Installation du kit d'entretien fabricant

Vérification temps de pressurisation

Contrôle ajustement pression

Vidange du réservoir sous pression



ASPIRATION

Remplacement du filtre

Nettoyage externe général

Nettoyage système de séparation

Potentielle mise à jour logicielle



INTRA-ORAL

Vérification de la tension du bras et des freins

Vérification de la tension du courant entrant

Test des dispositifs de sécurité

Test fonctionnel

CAPTEUR / LECTEUR

Capteur passage dans la mire

Lecteur de plaques,

passage de la plaque nettoyante

Changement des rouleaux





AUTOCLAVE

- Mise en place du kit maintenance fabricant
- Nettoyage chambre et plateaux
- Vérification des filtres
- Test de performance Bowie Dick et à vide
- Contrôle joints et verrouillage porte
- Vérification des capteurs et sondes
- Vidange et nettoyage des réservoirs
- Inspection des résistances et générateur de vapeur
- Vérification systèmes de sécurité

AUTOMATE PID

- Mise en place kit de maintenance fabricant
- Contrôle des filtres, buses, joints et liquides
- Test de pression

SOUDEUSE

- Nettoyage bande de soudure, rouleaux
- Vérification des capteurs et résistances
- Lubrification des pièces mécaniques
- Mise en place kit révision fabricant

THERMO DESINFECTEUR

- Mise en place du kit maintenance fabricant
- Contrôle et nettoyage des filtres
- Vérification et entretien des bras de lavage
- Contrôle du niveau de produit de nettoyage
- Test de performance du cycle
- Vérification des éléments chauffants
- Entretien du système de drainage
- Contrôle des capteurs et des sondes
- Entretien des composants mécaniques
- Mise à jour du logiciel (si applicable)



UNIT / FAUTEUIL

Fauteuil

Test fonctionnel
(élévation / graissage / inclinaison)

Vérification des switches de sécurité

Unit

Mise en place kit révision fabricant

Entretien de la vanne d'eau

Entretien de la seringue
(changement des joints)

Vérification du circuit hydrique
(changement des joints)

Vérification du circuit pneumatique
(changement des joints)



Scialytique

Nettoyage façade

Nettoyage réflecteur

Test fonctionnel

Crachoir

Nettoyage vanne de crachoir et test

Vérification circuit hydraulique

Vérification circuit vidange

Remplacement du filtre de vidange

Nettoyage et contrôle séparateur
d'amalgame, remplacement pièce usure

Aspiration

Changement des tuyaux d'aspiration

Changement filtre d'aspiration



CONE BEAM et CBCT

Nettoyage des surfaces et mire

Inspection des capteurs

Vérification des mécanismes de mouvement

Contrôle du système de refroidissement

Calibration annuelle

Mise à jour logicielle

Contrôle des systèmes de sécurité

Test de performance des images

Vérification électrique

HEKA



KAVO



vatech

NEWTOM



Euronda®



degréK



dentalart



ROSSICAWS

LORAN

dentalproject.

LYON - PARIS - CHELLES - VALENCE - GRENOBLE - BEAUNE - SAINT ETIENNE

contact@dentalproject.com - dentalproject.com

04 78 97 00 05